

nova ノバ デュオ

Duo



これから治療時間は、長くなる。



いま、口腔内をトータルに治療する

新たな診療スタイルが広がっています。

大幅に延びる1回の治療時間。

つまり、これからのユニットに、第一に求められるのは快適性能。

患者さんに負担をかけない、

そしてドクターへの負担も軽減できるユニットこそが、

支持されるユニットになっていくはずです。

ノバ デュオは、時間を忘れるここちよさへ。



さらなる快適性能。

ノバ デュオはその実現のために、

長時間治療で患者さんの身体にかかる負担を洗い出し、

細部まで徹底的に見直しました。

治療という時間を、くつろぎのひとときへ。

患者さんも、ドクターも時間を忘れるALL NEWコンフォート、

ノバ デュオ誕生。

nova ノバ デュオ
Duo

いつまでも続く、ここちよさ。

実現したのは、かつてない快適さです。



長時間の治療を前提にした、 新開発スーパーソフトシート。

いま、シートに求められるのは長時間続く快適さ。ノバ デュオは、患者さんを優しく包み込みながら固定するスーパーソフトシートを新開発。驚くほど柔らかな座り心地を実現しています。



患者さんがリラックスできる、 ノーズニーのポジション。

ノーズニー・ポジション（安楽位）は、患者さんが、よりリラックスして治療を受けられるポジション。これも長時間続く快適さのための大切な機能です。

小柄なドクターにも配慮した 40cmのチェア最低位。

チェア最低位は、40cmまで下げることが可能。他のチェアの平均的な高さ（45cm※当社比）より低くでき、小柄なドクターでも治療しやすいよう配慮しています。



座面に設定した可動中心軸で 頭部がズレません。

ノバ デュオはシートを動かすしくみも新設計。頭のズレをなくし、患者さんが位置を修正する負担を軽減しました。



患者さんの身長に合わせて 調整できる可動式背板を採用。

ガス封入シリンダー内蔵で容易に高さを調整できる可動式背板を採用。肩甲骨部分のズレを防ぎ、従来のシートに比べより確実に患者さんを固定できます。



足首を優しく支える 収納式ムービングステップ。

かかとではなく「足首」を支える新発想のムービングステップ。人間工学に基づいた設計で、長時間治療の際の疲労を緩和する、きめ細かい機能です。



患者さんに負担をかけない 90度脚折れタイプチェアー。

患者ポジションが安定し、座りやすい90度脚折れタイプを採用。患者さんの導入・退出の際にも身体に負担をかけない高齢の方に優しい機能です。



患者さんが無理なく開口できる、 頸椎保持型ヘッドレスト。

頸椎から頭部をしっかり支え、無理なく開口できる頸椎保持型ヘッドレストです。長時間の治療の際にも患者さんの疲労を軽減します。

●省スペース設計のオーバーアーム・タイプ

コンパクト設計のノバ デュオのなかでも設置スペースに
余裕のない場合に最も適したオーバーアーム・タイプ。

ワイドなドクターテーブルを備え、
省スペースと使いやすさが際立つタイプです。



※写真はオプション装備例です。

nova ノバ デュオ
Duo

nova Duo Type-II
Overarm オーバーアーム・タイプ

ドクターに、患者さんに、負担をかけない。
ノバ デュオは、そんな思いやりでできています。



ワイドサイズのドクター&アシスタントテーブル。

ドクター&アシスタントテーブルともに、診療機器や器具などをたっぷり置けるワイドサイズです。

●プッシュ式光付3方注水タービン

3方向注水で効果的に切削部位とバーを冷却。



医療機器承認番号:21300BZZ00164000

●内部注水マイクロモーター&ハンドピース

マイクロモーターは高トルクを誇る40C。ハンドピースは高性能S40MI/S40SIを標準装備。



医療機器承認番号:20800BZY00198000



医療機器承認番号:20800BZY00199000

●チップエアーを装備

タービンにチップエアーを装備。エアーで切削粉などを除去。

●インスツルメントハンガー

タービン、マイクロモーターの他、3WAYシリンジを装備。

●アシスタントハンガー

バキューム、3WAYシリンジ、排唾、パネルスイッチを装備。

●パネルスイッチ

チェアポジションから各種設定まで各部の機能を集中制御。

●VFD表示モニター

マイクロモーターの回転数、タイマー等の設定状況を表示します。



チップエアー



VFD表示モニター

患者さんに負担をかけない 回転式スピットン。

患者さんの正面までスピットンが動くので、どんな
でも楽な姿勢でうがいができます。

●光センサータイマー方式コップ給水

光センサーの感知で紙や金属コップでも
自動的に給水。

オペレーティングライトは、 自在に動く軸可動式。

オペレーティングライト(無影灯)の可動軸を3軸
とすることで照射位置を自在に設定できます。

●スイッチにはノータッチセンサーを採用

調光は2モード設定できます。



●フットコントローラー

スライド式で使いやすいS型フットコントローラー。

●除菌水フィルター・ユニボア確認窓

除菌水フィルター・ユニボアの汚れが視認でき、
交換時期を測れる確認窓です。



ユニボア



ユニボア確認窓



● 対面診療が容易に行えるベースマウント・タイプ。

義歯調整など対面診療が多い場合に適したタイプです。
また、ドクターと患者さんの動線が分離できるので、
診療スペースに合わせて前導入・後導入のどちらでも行えます。

nova Duo Type-I
Base Mount ベースマウント・タイプ

※写真はオプション装備例です。

● スペースを自由につくれるカート・タイプ。

ドクターテーブルを自在に移動できるカート・タイプは、
インプラント治療などチェアサイドに多くの器材を置く必要のある外科診療や、
介護者が必要な患者さんを治療する際に適しています。

nova Duo Type-III
Cart カート・タイプ

※写真はオプション装備例です。



オプション OPTION



●ディスプレイアーム/ポールタイプ



●パノラマシャーカステン/S型
シャーカステン



●超音波スケーラー/ブチビエゾ



●光重合器/キュアマックス



●ガスパーナー/GB-IIβ-1



●セバマチック (ボックス付)



●光付5倍速マイクロモーター
ハンドピース/YW S200MLX
医療機器承認番号:20800BZY00195000



●光付マイクロモーター
40DS-LUX
医療機器承認番号:21000BZZ0052000



●デジタル口腔内カメラ/STV Pro II



●フットコントローラー/930型



●シリコンシート/ピンクまたはブルー



●タービンハンドピース/JF-ONE全シリーズ


シートカラー SEAT COLOR



ピーチピンク



アップルグリーン

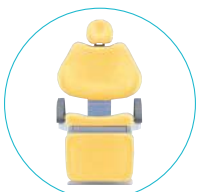

サマーイエロー



スノーホワイト



セシリアブルー



ウォーターブルー

ノバ デュオ仕様

- 商品名:ノバ デュオ
- 消費電力:750VA
- チェアタイプ:脚折れタイプ
- 重量:I型/238kg、II型/235kg、III型/236kg
- 電源:AC100V 50/60Hz
- 医療機器承認番号:21600BZZ00544000

※モニター画面ははめ込み合成です。※当カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により予告なく変更する場合があります。また、掲載商品の色調は実際の商品の色と異なる場合があります。

◎取扱い歯科商店名

発売元

株式会社 **ヨシタ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2941 [診療機器部]

製造販売元

株式会社 **吉田精工**

〒311-3506 茨城県行方市八木蒔660 TEL.0299-57-0111 (代表)

禁無断転載

2008年11月/日/50/60/再






(01)02747937005811




nova Duo

寸法図 (寸法単位: mm)




nova Duo Type-I / BASE MOUNT ベースマウント・タイプ

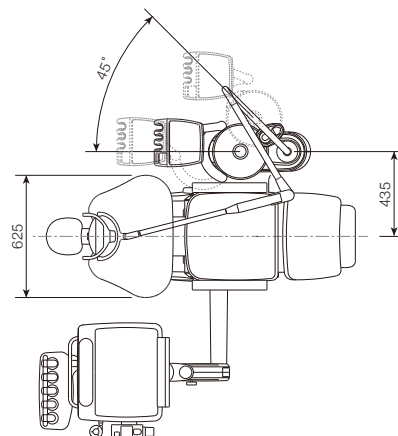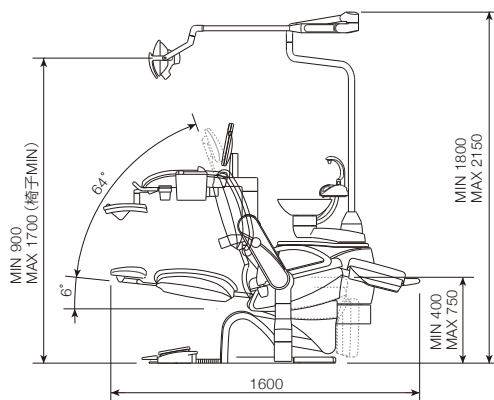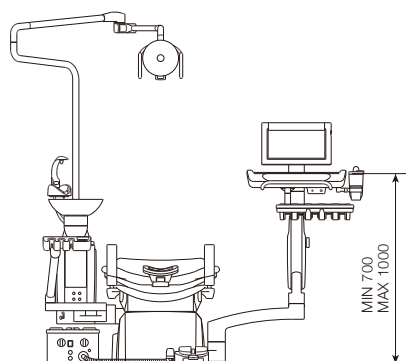

nova Duo Type-II / OVERARM オーバーアーム・タイプ

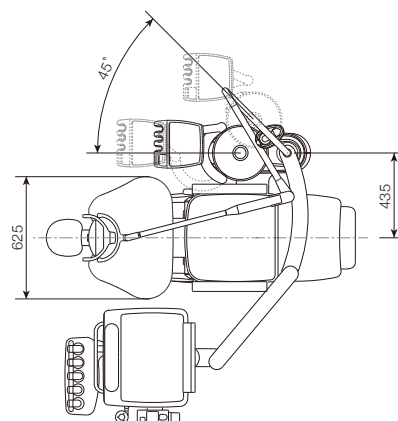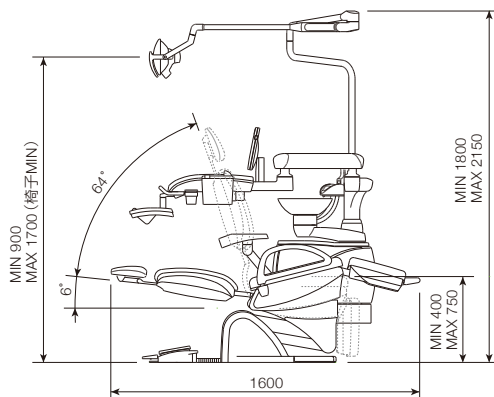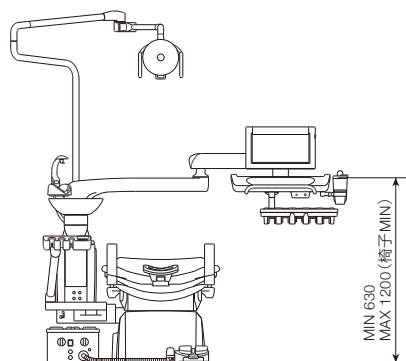


nova Duo Type-III / CART カート・タイプ

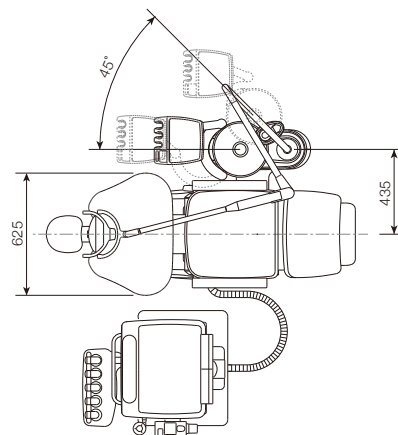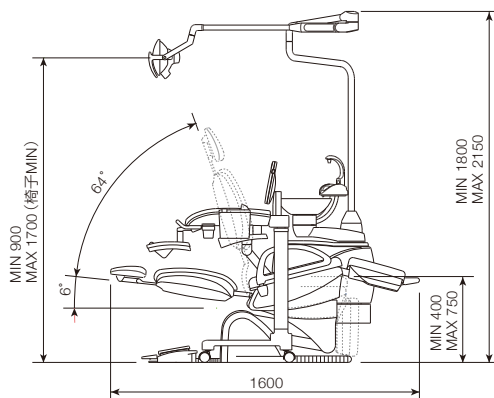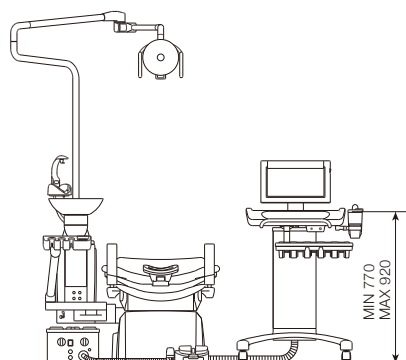

配置図 (寸法単位: mm)


nova Duo I、II、III型共通

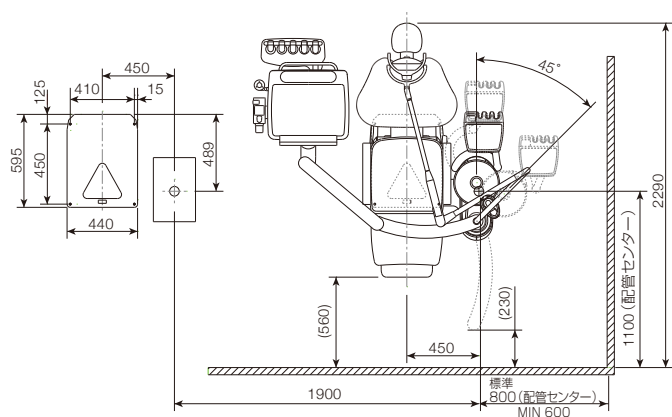

配管工事図 (寸法単位: mm)

nova Duo I、II、III型共通

- ※1 電気コンセントは、JIS T1021 (医用差込接続器) に適合するものを使用、JIS T1022 (病院電気設備の安全基準) に基づいて施工すること。
- ※2 バルブは各都道府県水道局規格認定品で、PF1/2ベンリ管に接続可能なもの。
- ※3 立上り寸法100mmは標準的なもので、各都道府県水道局の指導により、異なってくる場合がありますので、詳細は、各地区の営業所にお問い合わせください。

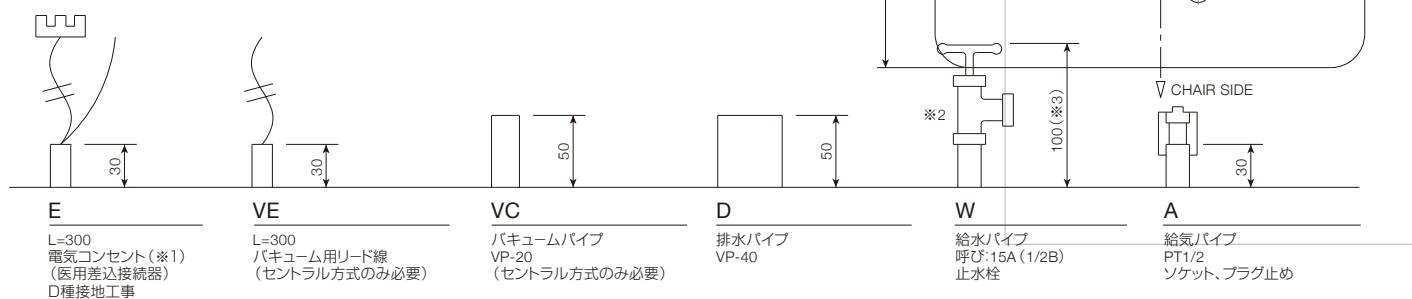

▲ 注) パソコン、フリーアーム等電源を必要とする場合は必要数増やして配線を引き込む事。
但し、必ずユニット本体と他は別電源とする事。